


Graphics

EL	Οδηγίες χρήσης Φακοί επαφής ACUVUE Ημερήσιας Αντικατάστασης	3
CS	Návod k použití – Jednodenní jednorázové kontaktní čočky ACUVUE.	5
PL	Instrukcja używania jednodniowych soczewek kontaktowych	7
UK	Інструкція із застосування контактних лінз ACUVUE (АКУВЬЮ) для денного носіння	9

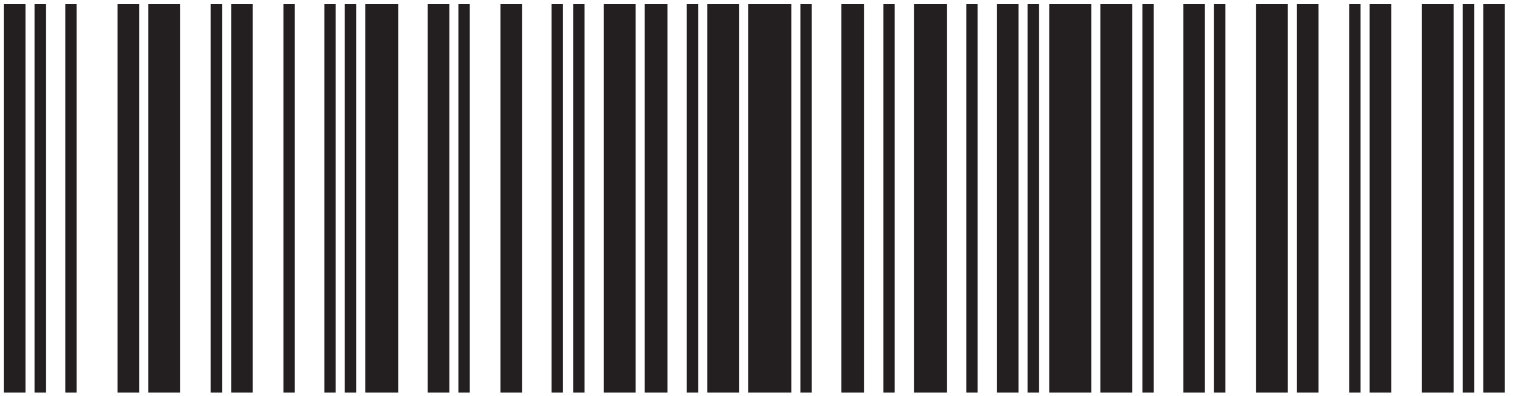

TINF00826E

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

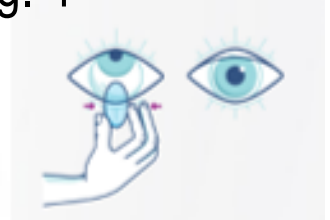

ACUVUE®



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway,
Jacksonville, Florida, 32256, USA



IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care
Ireland UC, The National Technology Park,
Limerick, Ireland



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office
Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com



ΕΛ Οδηγίες χρήσης Φακοί επαφής ACUVUE Ημερήσιας Αντικατάστασης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ACUVUE ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ. ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα του καταλόγου στη δική σας χώρα.

ACUVUE OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe, ACUVUE OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe, ACUVUE OASYS MAX 1-Day Contact Lenses, ACUVUE OASYS MAX 1-Day Contact Lenses for ASTIGMATISM, ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL Contact Lenses, ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM Contact Lenses

Υγρό Συσκευασίας: Ρυθμιστικό βορικό αλατούχο διάλυμα με μεθυλικό αιθέρα κυτταρίνης.

Υλικό: senofilcon A

1-DAY ACUVUE MOIST Brand Contact Lenses, 1-DAY ACUVUE MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL Contact Lenses.

Υγρό Συσκευασίας: Ρυθμιστικό βορικό αλατούχο διάλυμα με ποβιδόνη.

Υλικό: etafilcon A

Τα βορικά (βορικό οξύ και βορικό νάτριο) ορίζονται ως ουσίες CMR 1B σε συγκέντρωση υψηλότερη από 0,1% κατά βάρος και είναι ασφαλή όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Φακοί επαφής ACUVUE Ημερήσιας Αντικατάστασης που προορίζονται για να τους φοράτε για < 24 ώρες, για όσο διάστημα δεν κοιμάστε. Ο εφαρμοστής σας θα πρέπει να συνταγογραφήσει τους φακούς και να καθορίσει το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα χρήσης για εσάς. Οι φακοί σας δεν χρειάζονται καθαρισμό ή απολύμανση και θα πρέπει να απορρίπτονται μετά την αφαίρεση.

- Οι Ημερήσιας Αντικατάστασης Σφαιρικοί Φακοί Επαφής ACUVUE προορίζονται για Ημερήσια Χρήση για τη διόρθωση της όρασης, της μυωπίας και της υπερμετρωπίας, σε άτομα με υγιή μάτια που ενδεχομένως έχουν $\leq 1.00D$ αστιγματισμό.

- Οι Ημερήσιας Αντικατάστασης Φακοί Επαφής ACUVUE για ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ προορίζονται για Ημερήσια Χρήση για τη διόρθωση της όρασης, της μυωπίας και της υπερμετρωπίας, σε άτομα με υγιή μάτια που έχουν αστιγματισμό.

- Οι Ημερήσιας Αντικατάστασης Φακοί Επαφής ACUVUE για ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ προορίζονται για ημερήσια χρήση για την οπτική διόρθωση της μυωπίας και της υπερμετρωπίας σε άτομα με προεσβυωπία με υγιείς οφθαλμούς που έχουν αστιγματισμό βαθμού 0,75D ή λιγότερο.

- Οι Ημερήσιας Αντικατάστασης Φακοί Επαφής ACUVUE για ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ και ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜ προορίζονται για ημερήσια χρήση για την οπτική διόρθωση της μυωπίας και της υπερμετρωπίας σε άτομα με προεσβυωπία με υγιείς οφθαλμούς που έχουν αστιγματισμό βαθμού 0,75D έως 1,75D.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι φακοί επαφής με UV προστασία δεν αντικαθιστούν τα γυαλιά με UV προστασία. Θα πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε γυαλιά με UV προστασία, όπως σας έχουν συμβουλέψει.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Όταν φοράτε φακούς επαφής για διόρθωση όρασης, ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ σε περίπτωση οφθαλμικής πάθησης, τραυματισμού, φλεγμονής, λοίμωξης ή ανωμαλίας.

- Τυχόν πάθηση ή ασθένεια του οφθαλμού ή των περιβάλλοντων ιστών ενδέχεται να προκληθεί ή να επιδεινωθεί από τη χρήση φακών επαφής ή τη χρήση διαλυμάτων φακών επαφής.
- Εάν τα μάτια σας είναι κόκκινα ή ερεθισμένα. Ορισμένα άτομα ενδέχεται να αναπτύξουν αλλεργική αντίδραση σε χημικά ή συντηρητικά που ενδεχομένως περιέχονται στα διαλύματα φροντίδας των φακών επαφής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προειδοποιήσεις μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή λοίμωξη, απώλεια όρασης ή τύφλωση. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ), ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΕΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (Ενοχλήσεις στα μάτια, Απώλεια της όρασης, Μεταβολές στην όραση, Υπερβολική δακρύρροια, Ερυθρότητα στα μάτια) θα πρέπει ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΣΑΣ.

- Μη φοράτε φακούς επαφής εάν υπάρχει οφθαλμική ασθένεια.
- ΜΗ ΦΟΡΑΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΚΟΙΜΑΣΤΕ.
- ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΝΕΡΟ, ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ. Απορρίψτε και αντικαθιστάτε οποιονδήποτε φακό επαφής έχει εκτεθεί σε νερό (μη φοράτε φακούς επαφής κατά τη διάρκεια των αθλημάτων στο νερό).
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΞΕΒΓΆΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΣΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΒΡΪΣΤΗΣ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΣΑΣ ΕΑΝ Η ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΛΙΣΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ, ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

- Φοράτε μόνο τους φακούς επαφής που σας έχουν συνταγογραφηθεί. Μην αλλάζετε τον τύπο ή τις παραμέτρους των φακών σας χωρίς να συμβουλευτείτε τον εφαρμοστή σας. Ρωτήστε τον εφαρμοστή σας σχετικά με το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης.
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ.
- ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τοιμπιδάκια ή άλλα εργαλεία για να αφαιρέσετε τους φακούς σας από τη θήκη τους.
- Το κάπνισμα ή/και η λήψη ορισμένων φαρμάκων (όπως τα αντισυλληπτικά ή άλλα φάρμακα) ενδέχεται να αυξήσει τα οφθαλμικά προβλήματα ή την ενόχληση στα μάτια.
- ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ όλους τους επιβλαβείς ή ερεθιστικούς ατμούς/τις αναθυμιάσεις. Έχετε τα μάτια σας κλειστά κατά τη διάρκεια της χρήσης των προϊόντων σε σπρέι.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ:

Αίσθηση καψίματος, τσούξιμο, φαγούρα και/ή ξηροφθαλμία - Μειωμένη άνεση με τους φακούς ή αίσθημα ότι κάτι υπάρχει στο μάτι σας - Οίδημα ή φλεγμονή μέσα ή γύρω από τα μάτια σας - Ερυθρότητα των ματιών - Προβλήματα στα βλέφαρα - Δακρύρροια ή/και ασυνήθιστες εκκρίσεις στα μάτια - Χαμηλή ή θολή όραση - Σχηματισμός ουράνιων τόξων ή φωστοτέφανων γύρω από τα αντικείμενα - Ευαισθησία στο φως - Προσωρινή βλάβη οφειλόμενη σε περιφερικές διηθήσεις, περιφερικά έλκη του κερατοειδούς και διάβρωση του κερατοειδούς. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΑΣ και να επικοινωνήσετε με τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρά οφθαλμικά προβλήματα.

- ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΑΓΓΙΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΑΣ, γιατί οι φακοί επαφής είναι πολύ ευαίσθητοι στη μόλυνση.
- ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΑΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΓΡΑΙΝΕΤΕ ΜΕ ΣΑΛΙΟ.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΣΑΣ.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες του εφαρμοστή σας σχετικά με την εφαρμογή και την αφαίρεση των φακών επαφής σας.

Συσκευασία φακών:

Αποκολλήστε προσεκτικά το σφράγισμα του αλουμινοχαρτου για να αποκαλύψετε τον φακό.

Εφαρμογή φακών:

Βεβαιωθείτε ότι ο φακός δεν είναι ανάποδα. Τοποθετήστε τον στον δείκτη σας για να επιβεβαιώσετε το σχήμα. Ο φακός θα πρέπει να έχει ένα φυσικό, καμπυλωτό σχήμα, σαν μπολ (Εικ. 1). Έχοντας τον φακό στον δείκτη του χεριού σας, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να συγκρατήσετε το επάνω βλέφαρό σας, ώστε να μην ανοιγοκλείσετε το μάτι σας. Τοποθετήστε τον φακό στο μάτι σας. (Εικ. 2 και 3).

Αφαίρεση φακού:

Κοιτάξτε προς τα επάνω, ωθήστε τον φακό προς το κάτω μέρος του ματιού, χρησιμοποιώντας τον δείκτη σας. Πιέστε μαλακά τον φακό ανάμεσα στον δείκτη και τον αντίχειρα για να τον αφαιρέσετε. (Εικ. 4)

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ:

Εάν εischωρήσουν στο μάτι σας οποιοδήποτε είδους χημικά (προϊόντα οικιακού καθαρισμού, προϊόντα κηπουρικής, εργαστηριακά χημικά κ.λπ.): ΑΜΕΣΩΣ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΣΑΣ Ή ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ (παρενεργειών):

Οποιοδήποτε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά τη χρήση των Φακών Επαφής ACUVUE θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και στην εθνική αρχή της χώρας σας.

Τα παρακάτω σύμβολα μπορεί να βρίσκονται στις ετικέτες ή στη συσκευασία.

Σύμβολο	Ορισμός
	Προσοχή, Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία παραγωγής
	Ημερομηνία λήξης
	Κωδικός παρτίδας
	Αποστείρωση με ατμό
	Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
	Ο παραγωγός συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και συνεισφέρει οικονομικά για την ανακύκλωση του προϊόντος
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Υποδεικνύει μεμονωμένο αποστειρωμένο σύστημα συσκευασίας
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση αυτού του προϊόντος από ή σε παραγγελία ενός αδειούχου εφαρμοστή
	Φίλτρο UV
	Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Σήμανση CE και Αριθμός Ταυτοποίησης κοινοποιημένου φορέα
DIA	Διάμετρος
BC	Βασική καμπυλότητα
D	Διοπτρίες (ισχύς του φακού)
CYL	Κυλινδρική ισχύς
AXIS	Άξονας
MAX ADD	Μέγιστο addition διόρθωσης
LOW / L	«Χαμηλό» κοντινό ADD
MID / M	«Μέσο» κοντινό ADD
HGH / H	«Υψηλό» κοντινό ADD
	Θέση φακού: σωστή
	Θέση φακού: λανθασμένη (φακός ανάποδα)
	«Σήμα αναγνώρισης» για τα συνοδευτικά χαρτιά των κιβωτίων και του περιτυλίγματος
	«Σήμα αναγνώρισης» για τα συνθετικά υλικά
	Άνοιγμα συσκευασίας (χαρτονένιου κουτιού)
	Περιέχει επικίνδυνες ουσίες
	Εισαγωγέας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Να μην ξαναχρησιμοποιείται (Μίας χρήσης)

Ημερομηνία αναθεώρησης: 07.2025

CS Návod k použití – Jednodenní jednorázové kontaktní čočky ACUVUE

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A ULOŽTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. KONTAKTNÍ ČOČKY (KČ) ACUVUE JSOU ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK A MĚLY BY BYT APLIKOVÁNY OČNÍM SPECIALISTOU. VŽDY DODRŽUJTE INSTRUKCE OČNÍHO SPECIALISTY A POKYNY V TĚTO BROŽUŘE.

POPIS VÝROBKU a DOPORUČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ:

Některé produkty v seznamu nemusí být ve vaší zemi dostupné.

Kontaktní čočky ACUVUE OASYS with HydraLux;

Kontaktní čočky ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HydraLux;

Kontaktní čočky ACUVUE OASYS MAX 1-Day; Kontaktní čočky;

ACUVUE OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM;

Kontaktní čočky ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL;

Kontaktní čočky ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for

ASTIGMATISM.

Roztok obsažený v balení: Pufrovaný fyziologický roztok obsahující boritan a metyléter celulózu

Materiál: senofilcon A

Kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE MOIST; Kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM;

Kontaktní čočky 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL.

Roztok obsažený v balení: Pufrovaný fyziologický roztok obsahující boritan a povidon.

Materiál: etafilcon A

Boritany (kyselina boritá a borát sodný) jsou v hmotnostní koncentraci 0,1 % definovány jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1B (CMR 1B) a při používání dle pokynů na etiketě jsou bezpečné.

Jednodenní jednorázové kontaktní čočky ACUVUE jsou určeny k nošení po dobu méně než 24 hodin v bdělém stavu. Váš oční specialista by vám měl čočky aplikovat a stanovit rozvrh nošení. Čočky nevyžadují čištění ani dezinfekci a po vyjmutí z oka by měly být zlikvidovány.

- Jednodenní jednorázové sférické kontaktní čočky ACUVUE jsou určeny pro denní nošení a optickou korekci myopie (krátkozrakosti) a hyperopie (dalekozrakosti) u osob se zdravými očima s astigmatismem $\leq 1,00$ D.
- Jednodenní jednorázové kontaktní čočky ACUVUE for ASTIGMATISM jsou určeny pro denní nošení a optickou korekci myopie (krátkozrakosti) a hyperopie (dalekozrakosti) u osob se zdravými očima, které mají astigmatismus.
- Jednodenní jednorázové kontaktní čočky ACUVUE pro korekci PRESBYOPIE jsou určeny pro denní použití a optickou korekci myopie (krátkozrakosti) a hyperopie (dalekozrakosti) u presbyopických osob se zdravými očima s astigmatismem nejvýše 0,75 D.
- Jednodenní jednorázové kontaktní čočky ACUVUE pro korekci PRESBYOPIE a ASTIGMATISMU jsou určeny pro denní použití a optickou korekci myopie (krátkozrakosti) a hyperopie (dalekozrakosti) u presbyopických osob se zdravými očima s astigmatismem 0,75 D až 1,75 D.

VAROVÁNÍ: KČ absorbující UV záření nenahrazují ochranu proti UV záření. I nadále byste měli používat brýle s UV filtrem dle doporučení.

KONTRAINDIKACE (kdy nepoužívat):

Pokud nosíte KČ ke korekci zraku, NEPOUŽÍVEJTE je:

- Pokud máte oční onemocnění, poranění, zánět, infekci nebo abnormalitu očí.
- Jakýkoli stav nebo onemocnění očí nebo okolní tkáně vyvolaný nebo zhoršující se nošením KČ nebo používáním roztoků na KČ.
- Jsou-li vaše oči zarudlé nebo podrážděné. U některých osob se může rozvinout alergická reakce na chemické nebo konzervační látky v roztocích pro péči o kontaktní čočky.

VAROVÁNÍ:

Nerespektování těchto varování může vést k závažné infekci, ztrátě zraku nebo slepotě. **PROBLÉMY S OČIMA, VČETNĚ VŘEDŮ OČNÍ ROHOVKY, MOHOU VZNIKOUT RYCHLE A VÉST AŽ KE ZTRÁTĚ ZRAKU. POKUD MÁTE JAKÝKOLIV Z NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍZNAKŮ (nepříjemné pocity v oku, ztráta zraku, změny vidění, nadměrné slzení, zarudnutí očí), měli byste KČ OKAMŽITĚ VYJMOUT A IHNED KONTAKTOVAT OČNÍHO SPECIALISTU.**

- Nenoste KČ, pokud máte nějaké oční onemocnění.
- NENOSTE KČ BĚHEM SPÁNKU.

- NEVYSTAVUJTE KČ VODĚ. MŮŽE TO VÉST K TĚŽKÉ INFEKCI. Vyhodte a vyměňte KČ vystavené vodě. (Nenoste KČ během vodních sportů.)
- NIKDY čočky neoplachujte vodou z vodovodu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEPOUŽÍVEJTE ČOČKY Z POŠKOZENÝCH NEBO DŘÍVE OTEVŘENÝCH BLISTRŮ NEBO ČOČKY PO UPLYNUTÍ DATA EXPIRACE.

- Noste pouze vlastní KČ, které vám byly předepsány. Neměňte typ ani parametry čoček, aniž byste se poradili s očním specialistou. Zeptejte se očního specialisty na termín kontrolní návštěvy.
- PŘED POUŽITÍM JAKÉHOKOLI LÉKU DO OČÍ KONTAKTUJTE SVÉHO OČNÍHO SPECIALISTU.
- NIKDY nepoužívejte pinzetu nebo jiné nástroje k vyjmutí čoček z obalu.
- Kouření a/nebo užívání některých léků (např. antikoncepce nebo jiných léků) může zhoršit problémy s očima nebo oční diskomfort.
- VYHÝBEJTE SE veškerým škodlivým nebo dráždivým výparům/kouřím. Během používání aerosolových produktů nechte oči zavřené.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Pálení, píchání, svědění a/nebo suché oči; snížený komfort při nošení nebo pocit cizího tělíska v oku; otok nebo zánět v očích nebo kolem očí; zarudnutí očí, problémy s očními víčky; vodnaté oči a/nebo neobvyklá oční sekrece, špatné nebo rozmazané vidění, duha nebo záře kolem předmětů, světloplachost; existuje riziko dočasného poškození kvůli periferním infiltrátům, periferní ulcerózní keratitidě a erozi rohovky. Jakmile zpozorujete jakýkoliv problém, měli byste KČ OKAMŽITĚ VYJMOUT a kontaktovat očního specialistu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Nedodržení návodu k použití může vést k závažným očním problémům.

- NEŽ SE DOTKNETE KČ, VŽDY SI UMYJTE RUCI, protože KČ jsou velmi citlivé ke kontaminaci.
- NIKDY NEVKLÁDEJTE ČOČKY DO ÚST ANI NEPOUŽÍVEJTE SLINY K JEJICH ZVLHČENÍ.
- NIKDY NEDOVLTE NIKOMU JINÉMU, ABY NOSIL VAŠE ČOČKY.
- Dodržujte pokyny očního specialisty, co se týče nošení a vyjímání KČ.

Blistr:

Opatrně odtrhněte krycí fólii, abyste odhalili čočku.

Nasazení čočky:

Ujistěte se, že čočka není naruby. Položte si čočku na špičku ukazováčku a zkontrolujte její tvar. Měla by zaujmout přirozený, prohnutý tvar podobný misce (Obr. 1). S čočkou na ukazováčku podržte druhou rukou horní víčko, abyste nemrkali. Nasaďte čočku na oko. (Obr. 2 a 3).

Vyjmutí čočky: Podívejte se nahoru a pomocí ukazováčku posuňte čočku do spodní části oka. Palcem a ukazováčkem čočku jemně stiskněte a vyjměte ji. (Obr. 4)

NALÉHAVÉ PŘÍPADY:

Pokud vám do očí stříknou chemikálie jakéhokoliv druhu (přípravky pro domácnost, zahradnické roztoky, laboratorní chemikálie atd.): OKAMŽITĚ OČI VYPLÁCHNĚTE VODOU Z VODOVODU A NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE OČNÍHO SPECIALISTU NEBO IHNED NAVŠTIVTE NEMOCNIČNÍ POKHOVOST.

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ (vedlejších příznaků):

Jakékoliv události, ke kterým došlo při nošení KČ ACUVUE, by měly být nahlášeny výrobcí a/nebo jeho zplnomocněnému zástupci a/nebo národnímu regulačnímu orgánu.

Na etiketách nebo na obalu se mohou objevit následující symboly.

Symbol	Definice
	Upozornění, vyhledejte informace nebo pokyny v návodu k použití
	Výrobce
	Datum výroby
	Použitelné do (datum expirace)
	Číslo šarže
	Sterilizováno horkou parou
	Nepoužívejte, pokud je balení poškozené.
	Poplatky za zpracování odpadu uhrazeny
	Zdravotnický prostředek v Evropském společenství
	Označuje jednoduchý systém sterilní bariéry.
	UPOZORNĚNÍ: Omezení prodeje a objednávání na oční specialisty (pouze v USA)
	UV filtr
	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství
	Značka CE a identifikační číslo oznámeného subjektu
	Průměr
	Zakřivení
	Dioptrie (optická mohutnost čočky)
	Hodnota cylindru
	Osa
	Nejvyšší adice
	„Nízká“ adice
	„Střední“ adice
	„Vysoká“ adice
	Správná orientace čočky
	Nesprávná orientace čočky (vnitřní stranou ven)
	„Identifikační značka“ pro papírové obaly a další obalový materiál
	„Identifikační značka“ pro kompozitní materiály
	Otevírání balení (kartonu)
	Obsahuje nebezpečné látky
	Dovozce v Evropském společenství
	Není určeno k opakovanému použití (pouze k jednorázovému použití).

Datum revize : 07.2025

PL Instrukcja używania jednodniowych soczewek kontaktowych

PROSIMY O UWAGĘ PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE TYCH INFORMACJI NA PRZYSZŁOŚĆ. SOCZEWKI KONTAKTOWE ACUVUE SĄ WYROBEM MEDYCZNYM I POWINNY BYĆ DOBIERANE PRZEZ SPECJALISTĘ OCHRONY ZDROWIA OCZU. ZAWSZE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ SPECJALISTY ORAZ INSTRUKCJI Z NINIEJSZEJ ULOTKI.

OPIS I ZASTOSOWANIE PRODUKTU:

Nie wszystkie z wymienionych produktów mogą być dostępne w Twoim kraju.

Soczewki kontaktowe marki ACUVUE OASYS with HydraLuxe;

Soczewki kontaktowe marki ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM

with HydraLuxe; Soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS MAX 1-DAY;

Soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS MAX 1-DAY MULTIFOCAL; Soczewki

kontaktowe ACUVUE OASYS MAX 1-DAY for ASTIGMATISM; Soczewki

kontaktowe ACUVUE OASYS MAX 1-DAY MULTIFOCAL for ASTIGMATISM.

Roztwór w opakowaniu: Sól fizjologiczna buforowana boranem z eterem metylowym celulozy. Materiał: senofilcon A

Soczewki kontaktowe marki 1-DAY ACUVUE MOIST; Soczewki kontaktowe marki 1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM; Soczewki kontaktowe 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL.

Roztwór w opakowaniu: Sól fizjologiczna buforowana boranem z powidonem.

Materiał: etafilcon A

Borany (kwas borowy i boran sodu) są zdefiniowane jako substancje CMR 1B w stężeniu powyżej 0,1% wagowo, a ich stosowanie jest bezpieczne, gdy produkt jest używany zgodnie z instrukcjami na etykiecie.

Jednodniowe soczewki kontaktowe ACUVUE, które są przeznaczone do noszenia krócej niż 24 godziny, bez okresu snu. Twój specjalista ochrony zdrowia oczu powinien przepisać soczewki i ustalić schemat użytkowania. Używanie soczewek nie wymaga czyszczenia lub dezynfekowania, a po zdjęciu należy je wyrzucić.

- Jednodniowe sferyczne soczewki kontaktowe ACUVUE przeznaczone do noszenia w trybie dziennym w celu korekcji wad wzroku, takich jak krótkowzroczność oraz nadwzroczność u osób mających zdrowe oczy i astygmatyzm mniejszy lub równy 1,00 D.
- Jednodniowe soczewki kontaktowe ACUVUE for ASTIGMATISM są przeznaczone do noszenia w trybie dziennym w celu korekcji wad wzroku, takich jak krótkowzroczność oraz nadwzroczność u osób mających zdrowe oczy i astygmatyzm.
- Jednodniowe soczewki kontaktowe ACUVUE jednorazowego użytku do korekcji PREZBIPII są przeznaczone do noszenia w trybie dziennym w celu korekcji wad wzroku, takich jak krótkowzroczność oraz nadwzroczność, u osób z prezbiopią mających zdrowe oczy i astygmatyzm mniejszy lub równy 0,75 D.
- Jednodniowe soczewki kontaktowe ACUVUE jednorazowego użytku do korekcji PREZBIPII i ASTYGMATYZMU są przeznaczone do noszenia w trybie dziennym w celu korekcji wad wzroku, takich jak krótkowzroczność oraz nadwzroczność, u osób z prezbiopią mających zdrowe oczy i astygmatyzm od 0,75 D do 1,75 D.

OSTRZEŻENIE: Soczewki kontaktowe blokujące promieniowanie UV nie zastępują okularów chroniących przed promieniowaniem UV. Należy nadal używać okularów blokujących promieniowanie UV zgodnie z zaleceniami.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie używać soczewek kontaktowych w przypadku choroby oczu, urazu, zapalenia, infekcji lub innych nieprawidłowości.

- Każdy stan chorobowy oka lub otaczających tkanek wywołany lub zaostrzony przez noszenie soczewek kontaktowych lub stosowanie roztworów do soczewek kontaktowych.
- Zacerwienie lub podrażnienie oka. U niektórych osób może wystąpić reakcja alergiczna na substancje chemiczne lub środki konserwujące w roztworach do pielęgnacji soczewek kontaktowych.

OSTRZEŻENIA:

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych infekcji, utraty wzroku lub ślepoty. **POWIKŁANIA OCNNE (W TYM OWRZODZENIA ROGÓWKI) MOGĄ SZYBKO SIĘ ROZWINĄĆ I PROWADZIĆ NAWET DO UTRATY WZROKU. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KTÓREGOKOLWIEK Z NASTĘPUJĄCYCH OBJAWÓW (uczucie dyskomfortu w obrębie oczu, utrata wzroku, zmiany widzenia, nadmierne łzawienie, zacerwienie oczu)**

NATYCHMIAST ZDEJMIJ SOCZEWKI I NIEWŁOZNIE SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ OCHRONY ZDROWIA OCZU.

- Nie noś soczewek kontaktowych jeśli występuje jakakolwiek choroba oczu.
- **NIE NOŚ SOCZEWEK KONTAKTOWYCH PODCZAS SNU.**
- **NIE NARAŻAJ SOCZEWEK KONTAKTOWYCH NA DZIAŁANIE WODY, PONIEWAŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO POWAŻNEJ INFЕКCJI.** Wyrzuć i wymień wszystkie soczewki kontaktowe wystawione na działanie wody (nie noś soczewek kontaktowych podczas uprawiania sportów wodnych).
- **NIGDY** nie płucz soczewek kontaktowych w wodzie z kranu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

NIE UŻYWAJ SOCZEWEK PO TERMINIE PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA LUB JEŚLI STERYLNY BLISTER JEST OTWARTY BĄDŹ USZKODZONY.

- Noś tylko swoje przepisane soczewki kontaktowe. Nie zmieniaj typu ani parametrów soczewek bez konsultacji ze specjalistą ochrony zdrowia oczu. Zapytaj swojego specjalistę ochrony zdrowia oczu o harmonogram wizyt kontrolnych.
- **ZAWSZE SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ OCHRONY ZDROWIA OCZU PRZED ZASTOSOWANIEM JAKIEGOKOLWIEK LEKARSTWA DO OCZU.**
- **NIGDY** nie używaj pęsety lub innych narzędzi do wyjmowania soczewek z pojemnika na soczewki.
- Palenie i/lub przyjmowanie niektórych leków (takich jak środki antykoncepcyjne lub inne leki) może nasilać problemy z oczami lub uczucie dyskomfortu.
- **UNIKAJ** wszelkich szkodliwych lub drażniących oparów/dymów. Podczas stosowania produktów w aerozolu zamknij oczy.

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE:

- Pieczenie, kłucie, swędzenie i/lub suchość oczu
- Zmniejszony komfort korzystania z soczewek lub uczucie ciała obcego w oku
- Obrzęk lub stan zapalny w oczach lub wokół oczu
- Zacerwienie oczu
- Dolegliwości dotyczące powiek
- Łzawienie oczu i/lub nietypowe wydzieliny z oczu
- Słabe lub niewyraźne widzenie
- Tęczne koła lub aureole wokół obiektów
- Wrażliwość na światło – może wystąpić czasowe pogorszenie widzenia z powodu obwodowych nacieków, obwodowych owrzodzeń rogówki i ubytków nabłonka rogówki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów **NATYCHMIAST ZDEJMIJ SOCZEWKĘ** i skontaktuj się ze specjalistą ochrony zdrowia oczu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania może spowodować poważne problemy z oczami.

- **ZAWSZE UMYJ RĘCE PRZED DOTKNIĘCIEM SOCZEWEK**, ponieważ soczewki są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia.
- **NIGDY NIE WKŁADAJ SOCZEWEK DO UST ANI NIE ŚLIŃ ICH.**
- **NIGDY NIE POZWALAJ NIKOMU INNEMU NOSIĆ TWOICH SOCZEWEK.**
- Postępuj zgodnie z instrukcjami specjalisty ochrony zdrowia oczu dotyczącymi noszenia oraz zdejmowania soczewek kontaktowych.

Opakowanie soczewki:

Ostrożnie odklej foliowe zamknięcie, aby odsłonić soczewkę.

Zakładanie soczewki:

Upewnij się, że soczewka nie jest wywrócona na lewą stronę. Umieść soczewkę na palcu wskazującym, aby zweryfikować jej kształt. Soczewka powinna mieć naturalny, zaokrąglony kształt podobny do miseczki (Rys. 1). Trzymając soczewkę na palcu wskazującym, przytrzymaj górną powiekę drugą dłonią, aby nie mrugnąć. Umieść soczewkę na oku (Rys. 2 i 3).

Zdejmowanie soczewki Spójrz w górę i przesuń soczewkę palcem wskazującym ku dołowi. Delikatnie ściśnij soczewkę pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, aby ją wyjąć. (Rys. 4)

STANY NAGŁE:

W przypadku dostania się do oczu jakiegokolwiek związku chemicznego (pochodzącego z produktów gospodarstwa domowego, nawozów ogrodniczych, chemikaliów laboratoryjnych itp.): NATYCHMIAST PRZEPŁUCZ OCZY WODĄ Z KRANU I SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ OCHRONY ZDROWIA OCZU ALBO UDAJ SIĘ NA IZBĘ PRZYJĘĆ W SZPITALU.

ZGŁASZANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH (działań ubocznych):

Każde zdarzenie związane z noszeniem soczewek kontaktowych marki ACUVUE należy zgłosić producentowi, autoryzowanemu przedstawicielowi i/ lub odpowiedniemu organowi krajowemu.

Poniższe symbole mogą pojawić się na etykietach lub na opakowaniach.

Symbol	Definicja
	Uwaga, Sprawdzić w instrukcji używania
	Producent
	Data produkcji
	Termin przydatności wyrobu do użycia.
	Kod serii
	Sterylizowane parą wodną
	Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami
	Wyrób medyczny na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Oznacza system pojedynczej bariery sterylnej
	OSTRZEŻENIE: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych ogranicza sprzedaż niniejszego wyrobu wyłącznie przez licencjonowanego specjalistę lub na jego zlecenie
	Filtr UV
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Znak CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej
DIA	Średnica
BC	Promień krzywizny
D	Dioptria (moc soczewki)
CYL	Moc cylindryczna
AXIS	Oś
MAX ADD	Najwyższy możliwy do skorygowania dodatek do bliży
LOW / L	„Mały” dodatek do bliży
MID / M	„Średni” dodatek do bliży
HGH / H	„Duży” dodatek do bliży
	Prawidłowa strona soczewki
	Nieprawidłowa strona soczewki (soczewka wywinięta na drugą stronę)
	„Znak identyfikacyjny” dla papieru i opakowania
	„Znak identyfikacyjny” dla materiałów kompozytowych
	Otwieranie Opakowania (Karton)
	Zawiera substancje niebezpieczne
	Importer we Wspólnocie Europejskiej
	Nie używać ponownie (do jednorazowego wykorzystania)

Data aktualizacji : 07.2025

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ. КОНТАКТНІ ЛІНЗИ ACUVUE (АКУВЬЮ) — ЦЕ МЕДИЧНІ ВИРОБИ; ЇХ МАЄ ПІДБИРАТИ ЛИШЕ ФАХІВЕЦЬ ІЗ КОРИГУВАННЯ ЗОРУ. ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ФАХІВЦЯ З КОРИГУВАННЯ ЗОРУ Й ВКАЗІВОК, НАВЕДЕНИХ В ІНСТРУКЦІЇ.

ОПИС І ПРИЗНАЧЕННЯ:

У вашій країні можуть бути представлені не всі перелічені продукти.

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe® (Контактні лінзи АКУВЬЮ ОАЗІС з Хайдралюкс).

ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe® for ASTIGMATISM (Контактні лінзи АКУВЬЮ ОАЗІС для корекції АСТИГМАТИЗМУ з Хайдралюкс).

Контактні лінзи ACUVUE® OASYS MAX 1-Day (АКУВЬЮ ОАЗІС МАКС 1-ДЕЙ);

Контактні лінзи ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM (АКУВЬЮ ОАЗІС МАКС 1-ДЕЙ ДЛЯ АСТИГМАТИЗМУ);

Контактні лінзи ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL (АКУВЬЮ ОАЗІС МАКС 1-ДЕЙ МУЛЬТИФОКАЛ);

Контактні лінзи ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM (АКУВЬЮ ОАЗІС МАКС 1-ДЕЙ МУЛЬТИФОКАЛ ДЛЯ АСТИГМАТИЗМУ).

Пакувальний розчин: буферний боратний фізіологічний розчин із повідоном. Матеріал: етафілкон А.

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses with LACREON® (Контактні лінзи 1-ДЕЙ АКУВЬЮ МОІСТ з ЛАКРЕОН); контактні лінзи 1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM (1-ДЕЙ АКУВЬЮ МОІСТ для корекції АСТИГМАТИЗМУ).

Контактні лінзи 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL (1-ДЕЙ АКУВЬЮ МОІСТ МУЛЬТИФОКАЛ).

Пакувальний розчин: буферний боратний фізіологічний розчин із повідоном.

Матеріал: етафілкон А.

Борати (борна кислота й натрію борат) визначаються як речовини класу CMR 1B у концентрації понад 0,1 % за масою та є безпечними, якщо вибір використовується відповідно до інструкцій на етикетці.

Ододенні контактні лінзи ACUVUE (АКУВЬЮ) для носіння протягом < 24 годин у стані неспання. Фахівець із коригування зору підбере вам лінзи і визначить відповідний режим носіння. Лінзи не підлягають чистенню або дезінфекції, їх слід викинути після використання.

●Сферичні ододенні контактні лінзи ACUVUE (АКУВЬЮ) призначені для денного носіння з метою оптичного коригування міопії (короткозорості) і гіперметропії (далекозорості) у пацієнтів без хронічних захворювань очей, але з можливим астигматизмом $\leq 1,00$ D.

●Ододенні контактні лінзи ACUVUE for ASTIGMATISM (АКУВЬЮ для корекції АСТИГМАТИЗМУ) призначені для денного носіння з метою оптичного коригування міопії (короткозорості) і гіперметропії (далекозорості) у пацієнтів з астигматизмом, але без хронічних захворювань очей.

●Ододенні контактні лінзи ACUVUE for PRESBYOPIA (АКУВЬЮ для корекції ПРЕСБІОПІЇ) призначені для денного носіння з метою оптичного коригування міопії (короткозорості) і гіперметропії (далекозорості) у пацієнтів із пресбіопією, які мають астигматизм 0,75 D або менше, але не мають хронічних захворювань очей.

●Ододенні контактні лінзи ACUVUE for PRESBYOPIA and ASTIGMATISM (АКУВЬЮ для корекції ПРЕСБІОПІЇ та АСТИГМАТИЗМУ) призначені для денного носіння з метою оптичного коригування міопії (короткозорості) і гіперметропії (далекозорості) у пацієнтів із пресбіопією, які мають астигматизм від 0,75 D до 1,75 D, але не мають хронічних захворювань очей.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Носіння контактних лінз із УФ-фільтром не замінює використання засобів для захисту від УФ-випромінювання. Ви повинні надіти використовувати окуляри з УФ-фільтром, дотримуючись відповідних рекомендацій.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Під час носіння контактних лінз для корекції зору НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ КОНТАКТНІ ЛІНЗИ у разі захворювання очей, травми, запалення, інфекції чи іншої патології.

- Будь-який стан або захворювання очей чи навколишніх тканин, спричинене або посилене носінням контактних лінз або розчинів для контактних лінз.
- У разі виникнення почервоніння або подразнення очей. У деяких осіб може виникати алергічна реакція на хімічні речовини або консерванти, які містяться в розчинах для догляду за контактними лінзами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Нехтування цими застереженнями може призвести до розвитку тяжкої інфекції, втрати зору або настання сліпоти. ЗАХВОРЮВАННЯ ОЧЕЙ (ВКЛЮЧНО З ВИРАЗКОЮ РОГІВКИ) МОЖУТЬ ШВИДКО ПРОГРЕСУВАТИ Й ПРИЗВЕСТИ ДО ВТРАТИ ЗОРУ. ЯКЩО ВИ ВІДЧУВАЄТЕ БУДЬ-ЯКІ З ТАКИХ СИМПТОМІВ (дискомфорт в очах, втрата зору, зміна зору, інтенсивна сльозотеча, почервоніння очей), НЕГАЙНО ЗНИМІТЬ КОНТАКТНІ ЛІНЗИ Й ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ФАХІВЦЯ З КОРИГУВАННЯ ЗОРУ.

- Не носіть контактні лінзи в разі виникнення будь-якого захворювання очей.
- ЗНИМАЙТЕ КОНТАКТНІ ЛІНЗИ ПЕРЕД СНОМ.
- УНИКАЙТЕ ДІЇ ВОДИ НА КОНТАКТНІ ЛІНЗИ, ОСКІЛКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИНИКНЕННЯ СЕРЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ. Викидайте й замінійте контактні лінзи після контакту з водою (не носіть контактні лінзи під час занять водними видами спорту).
- У ЖОДНОМУ РАЗІ не промивайте лінзи водою з-під крана.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛІНЗИ, ЯКЩО ВІДКРИТО ЧИ ПОШКОДЖЕНО СТЕРИЛЬНУ БЛІСТЕРНУ УПАКОВКУ, АБО ДОБІГ КІНЦЯ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ.

- Носіть тільки контактні лінзи, які вам призначив фахівець із коригування зору. Не змінюйте тип або параметри лінзи без консультації з фахівцем із коригування зору. Запитайте фахівця з коригування зору про наступний запланований візит.
- ОБОВ'ЯЗКОВО КОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ФАХІВЦЕМ ІЗ КОРИГУВАННЯ ЗОРУ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОЧЕЙ.
- У ЖОДНОМУ РАЗІ не використовуйте пінцет або інші інструменти, щоб дістати лінзу з контейнера.
- Куріння й/або прийом деяких лікарських засобів (як-от контрацептиви чи інші лікарські засоби) може ускладнити проблеми з очима або викликати дискомфорт в очах.
- УНИКАЙТЕ всіх шкідливих або подразливих парів/диму. Закривайте очі під час використання аерозольних засобів.

НЕБАЖАНІ РЕАКЦІЇ

Печіння, поколювання, свербіж і/або сухість очей, зниження відчуття комфорту під час носіння лінз або відчуття стороннього тіла в оці, набряк або запалення очей чи ділянок навколо очей, почервоніння очей, проблеми з повіками, підвищена сльозотеча та/або незвичні виділення з очей, зниження гостроти або помутніння зору, веселкові кола або ореоли навколо предметів, світлочутливість, тимчасове порушення зору внаслідок наявності периферичних інфільтратів, периферичної виразки рогівки та ерозії рогівки. Якщо ви помітите будь-які із зазначених проблем, НЕГАЙНО ЗНИМІТЬ КОНТАКТНІ ЛІНЗИ й зверніться до фахівця з коригування зору.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Нехтування інструкцією із застосування може призвести до виникнення тяжких проблем з очима.

- ОБОВ'ЯЗКОВО МИЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ТОРКАННЯМ ДО КОНТАКТНИХ ЛІНЗ, оскільки контактні лінзи дуже чутливі до забруднення.
- У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ КЛАДІТЬ ЛІНЗИ ДО РОТА Й НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ СЛИНИ НА ЛІНЗИ.
- У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ІНШИМ ЛЮДЯМ НОСИТИ ВАШІ ЛІНЗИ.
- Дотримуйтеся рекомендацій фахівця з коригування зору щодо носіння й знімання контактних лінз.

Упаковка лінз.

Щоб дістати лінзу, обережно відокремте фольгу від блістера.

Надягання лінзи.

Переконайтеся, що лінза не вивернута. Покладіть її на вказівний палець й огляньте її. Лінза повинна мати природну опуклу чашоподібну форму (рис. 1). Поклавши лінзу на вказівний палець, іншою рукою притримуйте верхню повіку, щоб не кліпати. Покладіть лінзу на око (рис. 2 і 3).

Знімання лінзи.

Подивіться вгору, зсуньте лінзу до нижньої частини ока вказівним пальцем. Щоб зняти лінзу, обережно тисніть її між великим і вказівним пальцем (рис. 4).

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ.

У разі потраплення в очі будь-яких хімічних речовин (засобів побутової хімії, садово-городніх засобів, лабораторних хімічних речовин) НЕГАЙНО ПРОМИЙТЕ ОЧІ ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ Й ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ФАХІВЦЯ З КОРИГУВАННЯ ЗОРУ АБО ДО ВІДДІЛЕННЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕБАЖАНІ РЕАКЦІЇ (побічні ефекти).

У разі виникнення будь-якого інциденту при носінні фірмових контактних лінз ACUVUE (АКУВЬЮ) повідомте про це виробника, уповноваженого представника та/або державний орган.

Країну походження див. на коробці. Повну адресу вказано нижче:

Уповноважений представник:

ТОВ «Солар Віжн», Україна, 04207, місто

Київ, вул. Лук'яненка Левка, будинок 9



Made in USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA.

Виготовлено в США: Джонсон енд Джонсон Віжн Кеа, Інк., 7500 Центуріон Парквей, Джексонвіль, Флорида 32256, США

Made in Ireland: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, formerly Johnson & Johnson Vision Care (Ireland), The National Technology Park, Limerick, V94 N732, Ireland. Виготовлено

в Ірландії: Джонсон енд Джонсон Віжн Кеа Ірландія ЮСі, раніше Джонсон енд Джонсон Віжн Кеа (Ірландія), Національний технологічний парк, Лімерік, V94 N732, Ірландія.



UA.TR.116

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 07.2025

Наступні позначення можуть розміщуватися на етикетці або упаковці контактних лінз.

Символ	Визначення
	Увага, Слідуйте інструкції із застосування
	Виробник
	Дата виготовлення
	Використати до (термін придатності)
	Код партії
	Стерилізовані парою або сухим жаром
	Не використовувати, якщо упаковку пошкоджено
	Утилізацію відходів сплачено
	Медичний виріб в Європейському Союзі
	Стерильна бар'єрна система
	УВАГА. Відповідно до законодавства США, продаж даного продукту дозволений тільки сертифікованими медичними фахівцями або за їхнім рецептом
	УФ-фільтр
	Уповноважений представник в Європейському Союзі
	Знак відповідності європейським стандартам та ідентифікаційний номер уповноваженого органу в Європейському Союзі
DIA	Діаметр
BC	Базова кривизна
D	Діоптрія (оптична сила)
CYL	Сила циліндру
AXIS	Вісь
MAX ADD	Максимальна addіація
LOW / L	Слабка addіація
MID / M	Середня addіація
HGH / H	Висока addіація
	Правильне положення лінзи
	Неправильне положення лінзи (лінзу вивернуто)
	Знак ідентифікації паперових коробок і пакувальних матеріалів
	Знак ідентифікації композиційних матеріалів
	Відкриття пакунку (Картон)
	Містить небезпечні хімічні речовини
	Імпортер у Європейському Співтоваристві
UA.TR.116	Номер органу з оцінки відповідності
	Знак відповідності технічним регламентам
	Не використовувати повторно (для одноразового використання)